




TrachFlush Hurtig Guide

FOR DETALJEREDE INFORMATIONER DOWNLOAD TRACHFLUSH BRUGERMANUAL FRA
WWW.TRACHFLUSH.COM/DOWNLOADS

18 MÅ IKKE ANVENDES PÅ PATIENTER UNDER 18 ÅR

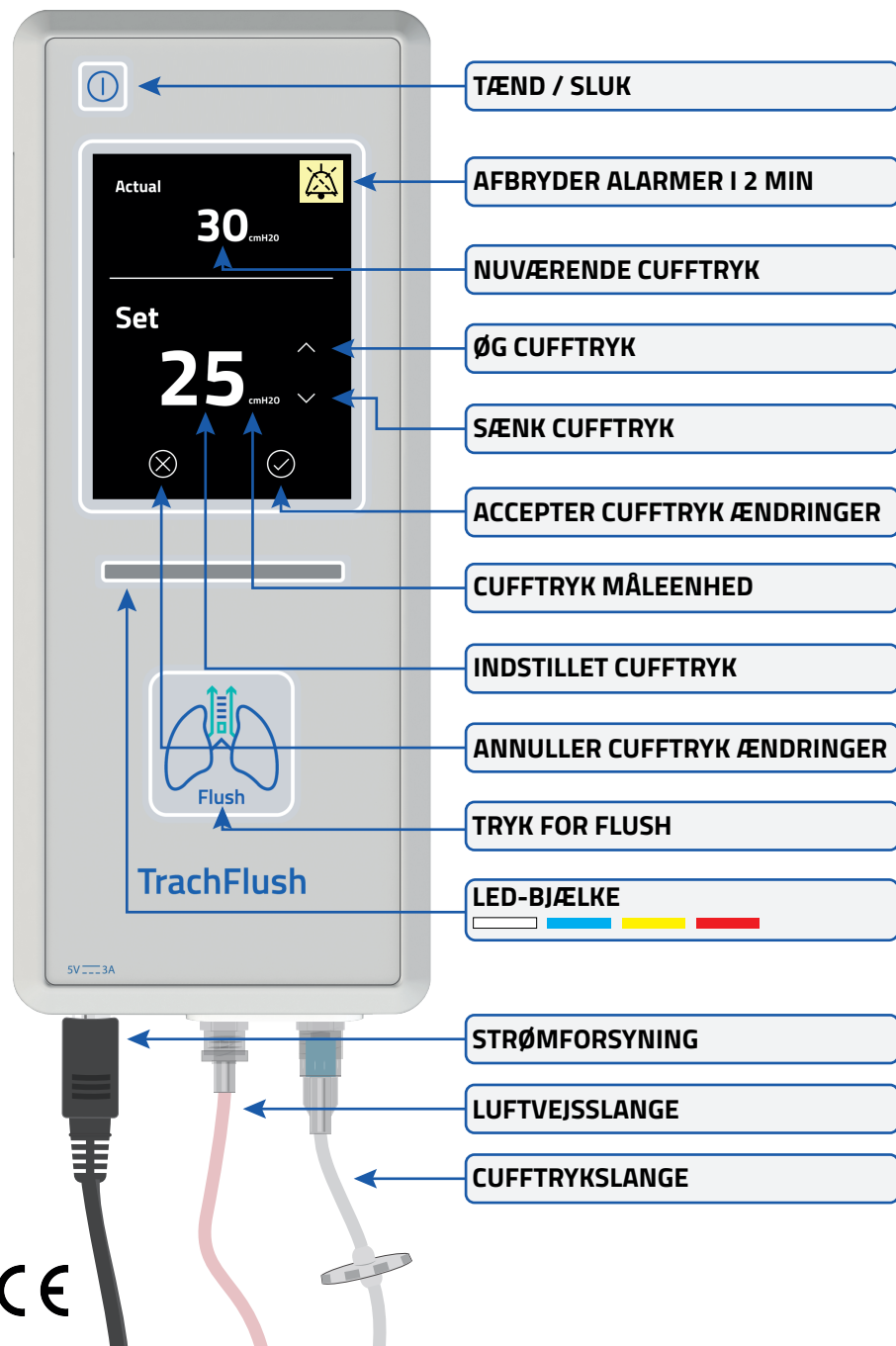

FORBERED TRACHFLUSH

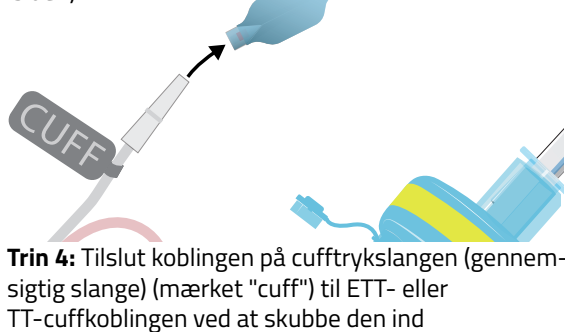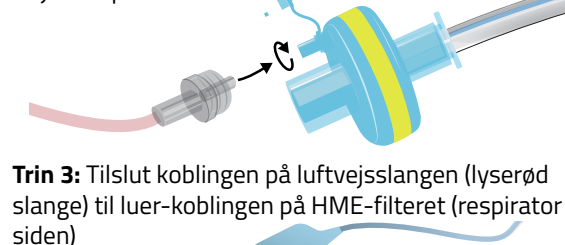

ALARMER



CUFFTRYK $\geq 70\text{CMH}_2\text{O}$



CUFFTRYK $> 50\text{CMH}_2\text{O}$



CUFFTRYK $< 5\text{CMH}_2\text{O}$



CUFF LÆKAGE



STRØMFORSYNING ER AFBRUDT



FLUSH ELLER CUFF JUSTERING I GANG



CUFFTRYKSLANGE IKKE TILKOBET



LUFTVEJSSLANGE IKKE TILKOBLET

INFORMATIONSSIGNALER



FLUSH FÆRDIG



FLUSH I GANG



**TJEKKER RESPIRATOR OG CUFFTRYK
INDSTILLINGER**



SERVICE AF ENHEDEN PÅKRÆVET

TrachFlush Hurtig Guide

FOR DETALJEREDE INFORMATIONER DOWNLOAD **TRACHFLUSH BRUGERMANUAL** FRA
WWW.TRACHFLUSH.COM/DOWNLOADS
FLUSH KONTROL

RESPIRATORINDSTILLINGER TIL BRUG AF FLUSH KONTROL



UNDERSTØTTER TRYK KONTROLLERET- & TRYK STØTTE VENTILATION (PCV+PSV)




P-PEAK ANBEFALES >20CMH₂O (PCV+PSV)
(HVIS P-PEAK ER <20CMH₂O FLERE FLUSH KAN KRÆVES FOR FJERNELSE AF SEKRET I LUFTVEJENE)




T-INSP ≥ 1.4 SEKUNDER (PCV)



P-RAMP ≤ 100ms (PCV)

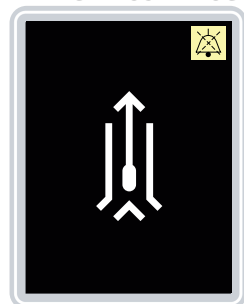

Når en Flush er i gang vises skærbilledet "Flush i gang", og LED-Bjælken blinker cyan

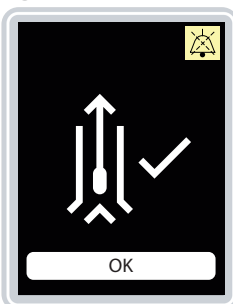


Når Flush'en er færdig skal du trykke på "OK"-knappen, og så vil TrachFlush vende tilbage til hovedskærm og automatisk aktivere Cuff Kontrol.

Respirator mode og indstillinger OK?


Ja

Nej

Hvis respirator mode og indstillinger er forkerte, kan en Flush stadig udføres

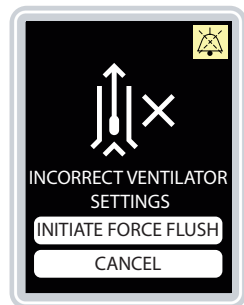


Aktiver Force Flush ved at trykke på "Initiate Force Flush"

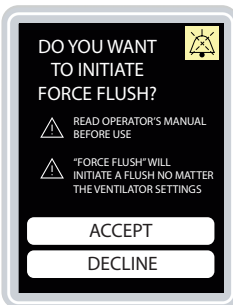

Tryk på "Accept"-knappen for at aktivere Force Flush.



Når Force Flush er i gang vises "Force Flushing"-skærmen og LED-Bjælken blinker cyan.

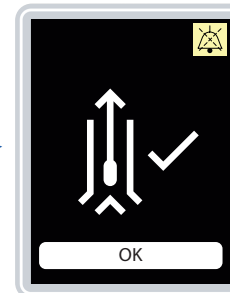

Når Force Flush er færdig skal du trykke på "OK"-knappen, og så vil TrachFlush vende tilbage til hovedskærm og automatisk aktivere Cuff Kontrol.

Luftveje ryddet for sekret?

Ja

Nej


Flush Færdig

Gentag Flush Control processen


CUFF KONTROL



Trin 1: Forøg cufftrykket ved at trykke på pilen op, eller sænk cufftrykket ved at trykke på pilen ned.

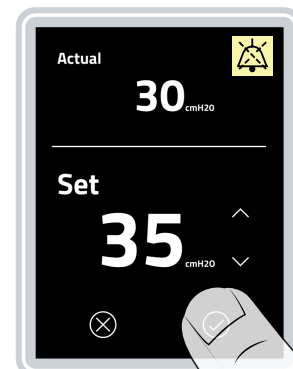

Trin 2: Accepter øget eller sænket cufftryk via accept-knappen

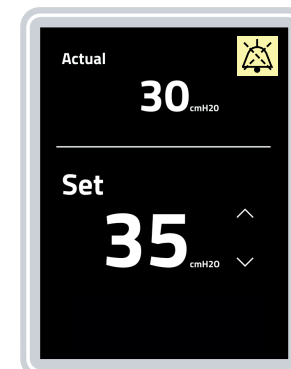

Cufftrykket er nu øget eller sænket